

FICHE TECHNIQUE





Suture Alan Glyde



MATIERE	<ul style="list-style-type: none"> • Acide Polyglycolique tressé et enduit • Coloré violet avec D & C Violet No.2 • Recouvert d'un revêtement unique de polycaprolactone et stéarate de calcium • Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone
INFOS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Suture chirurgicale stérile • Résorbable • Multi filament • Perte de résistance : 75% après 2 semaines, 50% après 3 semaines, perte de 90% de résistance après 4 semaines • Absorption totale après 10 semaines (70 jours) • Aiguille qui facilite le passage sans endommager le tissu • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication • Dispositif médical de classe III stérile, à usage unique • Tolérance générale : +/- 10 %
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • 12 pochettes stériles/boîte qui protège de la poussière • Uniquement à la marque Alan • Dimensions des boîtes : 62x130x62 mm • Dimensions cartons export : 60x40x60 cm, 216 boîtes/carton • A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Profil de l'aiguille	Description aiguille	Longueur de l'aiguille	Taille	Longueur du fil
SUTPG3	3/8	Tranchant inversé	19 mm	3/0	70 cm
SUTPG4	3/8	Tranchant inversé	19 mm	4/0	70 cm
SUTPG5	1/2	Tranchant inversé	16 mm	5/0	70 cm

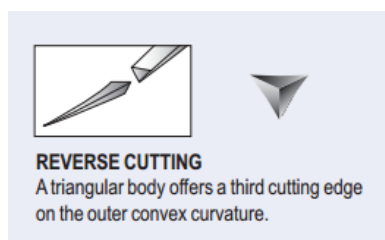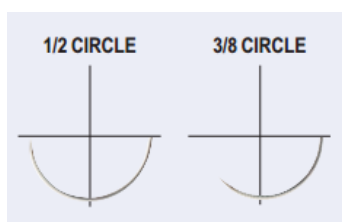

Ouverture facile

- 1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué 
- 2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible 
- 3 Utiliser le porte aiguille et retirer la suture 

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

Version 2021/02